


Pump up the jam...



- En av de största riskerna vid hantering av infusionsläkemedel är att **programmera en pump fel**
- Vilka moment bör göras innan start av infusion?
- Förutom rätt inställning av pump mot ordination, vilka fler inställningar bör beaktas?

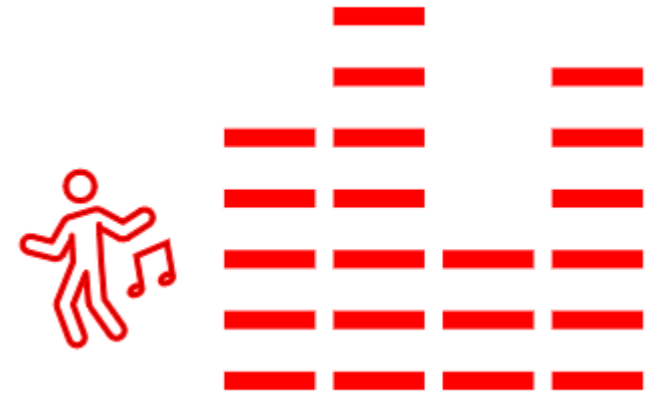

[Technotronic - Pump Up The Jam \(Official Music Video\)](#)

Pump it in, pump it in!

Innan start av infusion:

- Kontrollera Identitet, hastighet, dosenhet, koncentration, läkemedelsnamn
 - Steg 1. Innan sprutan sätts i pumpen. Kontrollera etiketten på infusionen mot ordination.
 - Steg 2. Kontrollera/Ställ in pumpen mot etiketten
 - Steg 3. Kontrollera pumpens inställning mot ordination.
- Säkerhetstips: Kontrollera steg 2-3 vid varje passbyte
- I steg 2 bör även dessa inställningar beaktas
 - Använd pumpprotokoll från läkemedelsbibliotek om de används på din avdelning
 - Kontrollera lämpligt motståndstryck på pumpen (kraften som pumpen använder för att pumpa in läkemedlet)
 - För intermittenta infusioner. Kontrollera att maxvolym alt VSSI finns angiven.
 - Kontrollera att rätt aggregat/spruta är insatt/vald.
 - Se till att aggregat på volympumpen är korrekt insatt
 - Se till att rätt spruta är vald i sprutpumpen



[Technotronic - Pump Up The Jam \(Official Music Video\)](#)



Läs mer:

https://eped.se/backup/eped/bestpractices/show_bestpractice_E02BP00121.html

LM
SÄKERHET
#121



1 min



eped.se